

Fairywill

Model: P11

Звуковая электрическая зубная щетка

Руководство по эксплуатации (RU)

Благодарим вас за выбор звуковой зубной щетки Fairywill P11. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием продукта и сохраните руководство пользователя в надежном месте для использования в будущем.


1. Характеристики:

- Водонепроницаемый и нескользящий корпус.
- Сменные чистящие насадки.
- Технология высокочастотной вибрации обеспечивает 62.000 движений щетки в каждом цикле*, эффективно удаляя зубной налет, предотвращая возникновение гингивита и глубоко очищая зубы и десны.
- USB-зарядка, удобство для путешествий и совместимость с мировым напряжением.
- Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора индикатор будет продолжать медленно мигать или зубная щетка не сможет включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости зарядки зубной щетки.
- 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд.

- В зубной щетке есть 3 режима: чистка, мягкий и Отбеливание. В щетку также встроена функция памяти режимов, что означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию остается таким же, как и режим, который был установлен во время последнего отключения зубной щетки.

2. Конструкция:

- ① Насадка щетки
- ② Кнопка Питание/Режим
- ③ Индикатор Режимы/Питание/Зарядки
- ④ Рукоятка
- ⑤ Порт зарядки

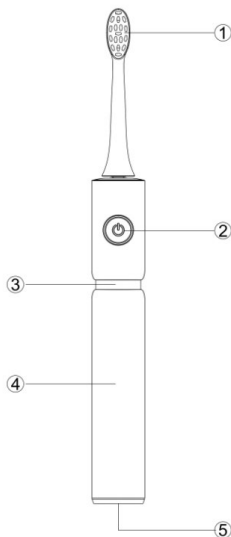

3. Операции:

★ Использование зубной щетки

- Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении.
- Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание».
- Переключайтесь между 3 режимами («Чистка, Мягкий и Отбеливание»), непрерывно нажимая кнопку «Питание».
- Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты.
- Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии десен.
- Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к

зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение длительного периода времени.

- Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости перейти в другую часть ротовой полости.
- Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты.
- Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты, включайте зубную щетку только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее изо рта только после выключения.

☆ Замена насадки для зубной щетки

- Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она находится в правильном положении.
- Отсоединение: потяните насадку зубной щетки от ручки.

☆ Зарядка зубной щетки

- Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она полностью заряжена для повторного включения.
- Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.
- Если во время работы индикатор медленно мигает, это указывает на низкий уровень заряда аккумулятора зубной щетки, пожалуйста, зарядите ее как можно скорее.
- Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания.
- Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор

загорится на две минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 30 дней.

- Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно безопасно использовать в ванной.

★ Режимы

● Первый режим: Чистка

В этом режиме щетка выполняет около 62 000 движений за каждый цикл*. Загораются 3 белых индикатора, размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Такой режим подходит для нормального состояния ротовой полости, обеспечивает сильнейший очищающий эффект и поддерживает здоровую гигиену полости рта.

● Второй режим: Мягкий

В этом режиме щетка выполняет около 56000 движений за каждый цикл*, горит только 1 белый индикатор, движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации является самой мягкой из трех режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами.

● Третий режим: Отбеливание

В этом режиме щетка выполняет от 56 000 до 62 000 движений за каждый цикл*, горят два белых световых индикатора, быстро меняется движение щетки и интенсивность вибрации. Бережная стимуляция, предназначенная для сохранения упругости и здоровья десен.

4. Технические характеристики:

Рабочая температура: 0-50°C

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока

Материал щетины: нейлон

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока

Номинальная мощность: 0,7-1,8 Вт

Время зарядки: 2 часа

Водонепроницаемость: IPX7

5. Меры предосторожности:

- Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без разрешения.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться с врачом перед использованием.
- Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, должны находиться под присмотром родителей или взрослых.
- Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время.
- Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей.
- Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам.
- Не подходит для детей младше 12 лет.

6. Послепродажное обслуживание:

- Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с Fairywill.
- В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от ситуации и его состояния.
- Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить Fairywill зубную щетку и подтверждение даты покупки (счет-фактуру).
- Гарантия не распространяется на следующее:

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания, подключением к неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.
- Старение и износ в результате нормального использования.
- Повреждения из-за использования продукта для других целей или использования компонентов, не от Fairywill.

* Стоматологи рекомендуют 2-минутный цикл чистки.
